

Design ergonomico, controllo preciso, utilizzo facile e intuitivo.

Porzione orientabile

consente il sollevamento delicato dell'epiglottide

Canale guida dedicato


per l'inserimento in sicurezza del tubo endotracheale

Videocamera HD USB

registra video e scatta foto con l'app gratuita MedC

Misura unica

utilizzabile su un'ampia gamma di pazienti adulti

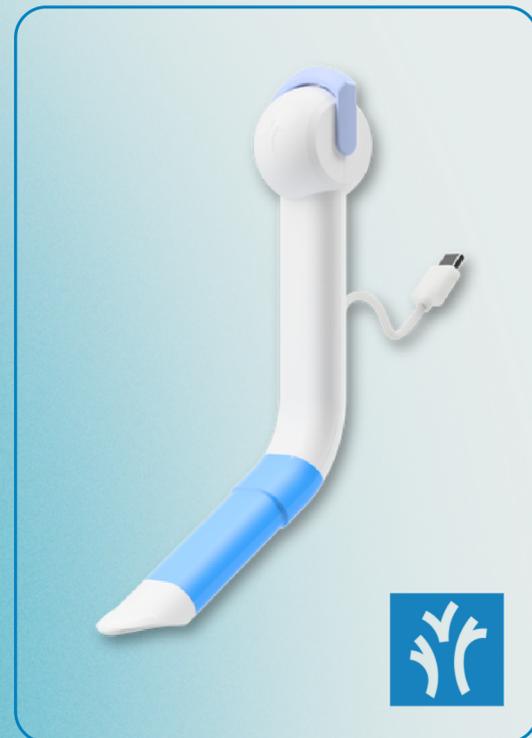


medSniper è lo strumento perfetto
per supportare medici e operatori sanitari nelle
loro procedure quotidiane

Senza batteria

maggiore rispetto per l'ambiente e sempre pronto all'uso

Monouso

ridotto rischio di infezione, per prestazioni sempre ottimali

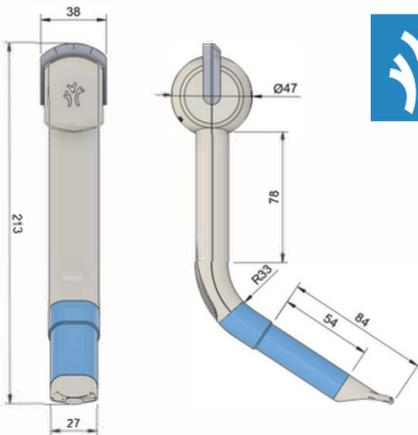

spessore parte inseribile: 17mm
offre un ingombro minimo all'inserimento in bocca

design ergonomico
guaina autolubrificante
videocamera HD
6 luci LED

struttura principale e membrana di rivestimento realizzate con materiali termoplastici medicali

Specifiche tecniche

- Peso: 80 g
- Lunghezza impugnatura: 83 mm
- Lunghezza parte orientabile: 42,5 mm
- Lunghezza parte inseribile: 96,75 mm
- Corpo principale: altezza 17 mm, larghezza 28 mm
- Canale ETT: diametro 13,5 mm, lunghezza 95 mm
- Videocamera con connettività USB-C: FOV 85°, risoluzione HD (1280x720), grado di protezione IP67 all'acqua e particelle



AV Medical s.r.l. - Via Lava Troia 87, Torre del Greco - Napoli | www.avmedical.it
info@avmedical.it | +3908119244731