

# Auto Fuser K Series



Microinfusore  
 elastomerico  
 monouso



◀ ● AutoFuser K flusso continuo  
 AutoSelector K flusso continuo ● ▶



## Auto Fuser K Series



◀ ● AutoFuser K flusso continuo e bolo  
 AutoFuser K solo bolo  
 AutoSelector K flusso continuo e bolo ● ▶



### CARATTERISTICHE



Volume	60, 100, 150, 250, 400, 500 ml
Velocità di flusso	0.5 ~ 500 ml/h
Velocità selettore	0.5 - 7 ml/h (A-type) oppure 1 - 14 ml/h (B-type)
Volume Bolo	0.5, 1.0, 2.0, 3.0, 5.0 ml
Tempo di latenza	10, 15, 30, 60 min


# AutoFuser K

È un microinfusore elastomerico ad alta efficienza e dimensioni contenute per l'utilizzo in ambito ospedaliero, ambulatoriale e domiciliare



### Connessione Siringa Luer Lock

Il port di riempimento luer lock, progettato per prevenire fuoriuscite nel processo di riempimento, e la superficie piana del fondo del microinfusore consentono due diverse modalità di riempimento

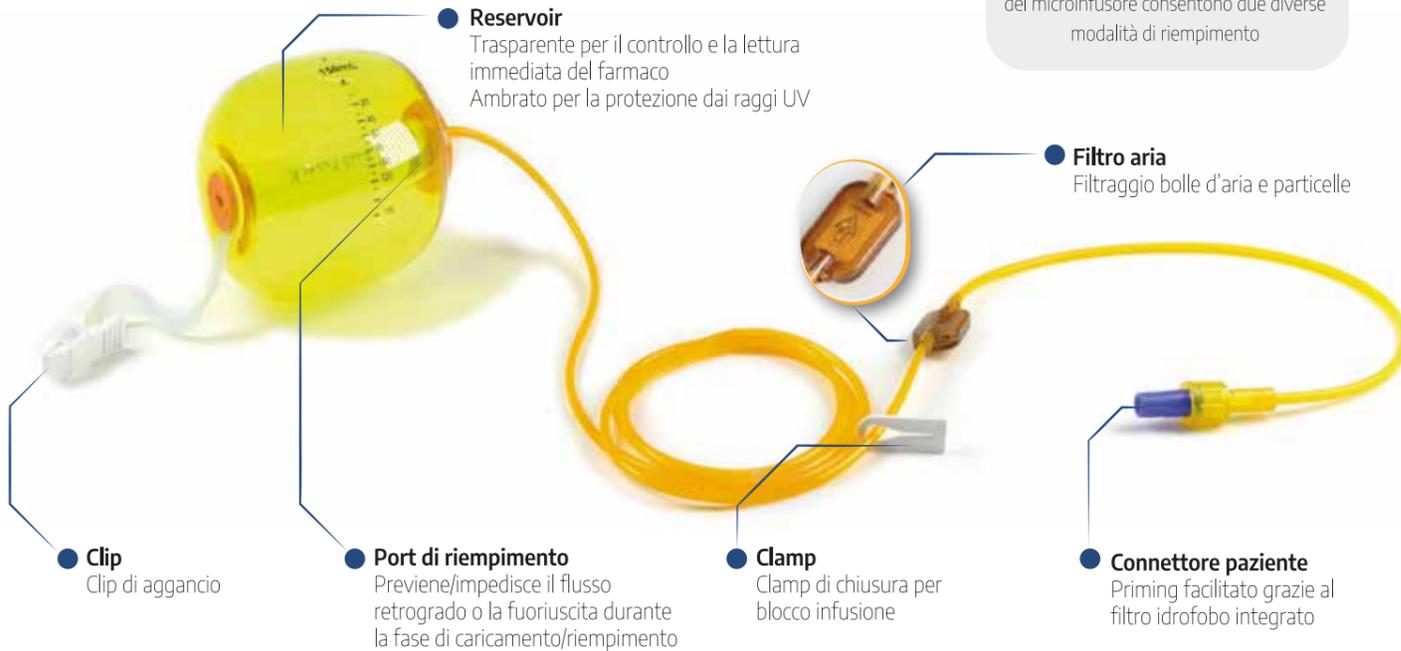

### Reservoir

Trasparente per il controllo e la lettura immediata del farmaco  
Ambrato per la protezione dai raggi UV

### Filtro aria

Filtraggio bolle d'aria e particelle

### Clip

Clip di aggancio

### Port di riempimento

Previene/impedisce il flusso retrogrado o la fuoriuscita durante la fase di caricamento/riempimento

### Clamp

Clamp di chiusura per blocco infusione

### Connettore paziente

Priming facilitato grazie al filtro idrofobo integrato


# Auto Selector K

È un microinfusore elastomerico a flusso variabile

### Selettore:

- La ghiera può essere rimossa dal personale medico per impedire la manomissione da parte del paziente. Solo il personale medico può modificare le diverse velocità di flusso

- Range di flusso disponibili :  
da 0,5 a 7 ml/h (A-Type)  
da 1 a 14 ml/h (B-Type)

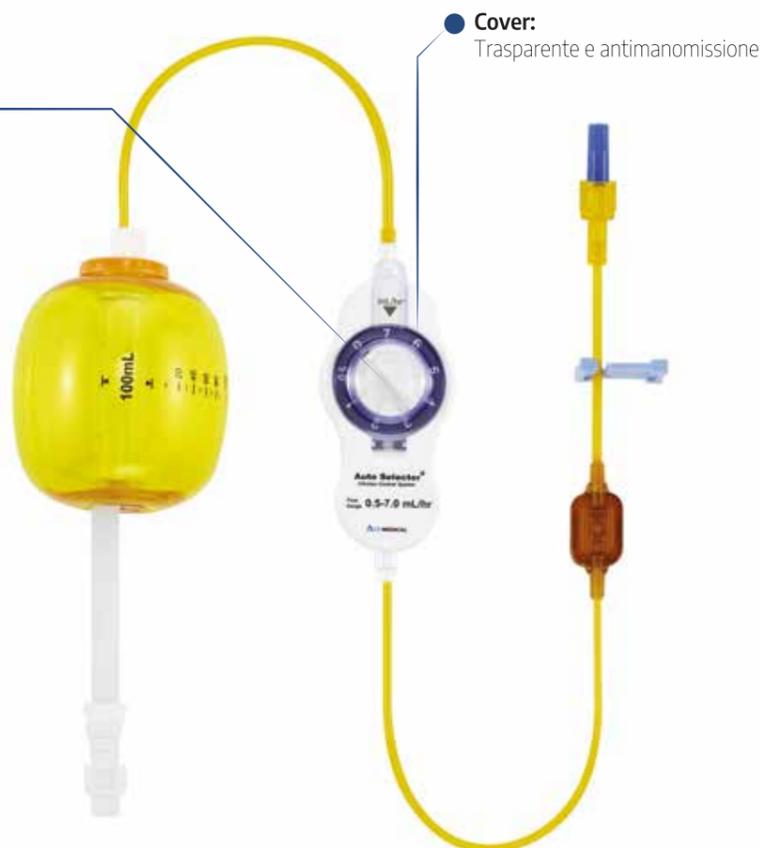

### Cover:

Trasparente e antimanomissione



### Infusore a flusso variabile

Il selettore permette all'operatore sanitario di impostare la velocità del flusso desiderata in base alle esigenze del paziente

# Bolo/PCA

Presente nella versione

AutoFuser K e AutoSelector K

### Bolo / PCA

- Possibilità di infondere un unico bolo
- Finestra con visualizzazione latenza e dose del farmaco
- Pulsante ergonomico di facile utilizzo



## VANTAGGI

- Design compatto**  
Il più piccolo microinfusore elastomerico sul mercato con un design compatto ed ergonomico per il massimo comfort del paziente
- Protezione UV**  
Il case di colore ambrato protegge dai raggi UV i farmaci contenuti all'interno
- Connettore**  
Processo di priming facilitato grazie al filtro terminale idrofobo integrato
- Reservoir rigido**  
Il reservoir rigido protegge la membrana elastomerica interna da impatti esterni. Guscio trasparente per un controllo immediato della quantità di farmaco e il corretto funzionamento
- Caricamento**  
Semplicità e funzionalità caratterizzano le operazioni di caricamento da parte degli operatori sanitari
- LATEX-free e DEHP-free**  
AutoFuser K utilizza materiali idonei per prevenire eventuali allergie



## INDICAZIONI



Chemioterapia



Gestione del dolore post operatorio



Gestione del dolore in ambito oncologico



Talassemia



Idratazione



Antibiotico terapia